

AS SEEN ON
TV
ORIGINAL



Gebrauchsanleitung



LIEFERUMFANG (#1):



1 x VibroShaper Belt



1 x Adapter



1 x Gebrauchsanleitung



1 x Ernährungsplan

Bezeichnung der Teile (#2):



Vorderseite


1. Gürtel
2. Display
3. Hauptabdeckung



Rückseite

4. Bereich Massage und Vibration
5. Netzstecker
6. Infrarot- und Wärmebereich
4. Bereich Massage und Vibration

Display-Tasten (#3)

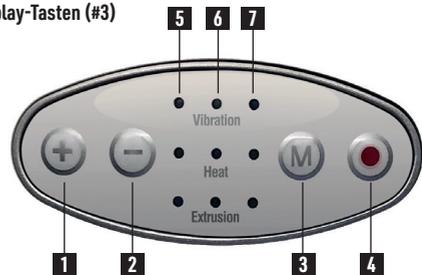

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Plus-Taste | 5. LED-Anzeigen der Stufe 1 | 7. LED-Anzeigen der Stufe 3 |
| 2. Minus-Taste | 6. LED-Anzeigen der Stufe 2 | |
| 3. Menütaete „M“ | | |
| 4. Power-Taste | | |

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DIE EMPFEHLUNGEN ZUR SICHERHEIT UND ZUM KORREKTEN GEBRAUCH DES GERÄTS

- Sollten Sie wider Erwarten Schmerzen oder Beschwerden verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Wenn Sie wegen besonderer Umstände (zB Schwangerschaft, Herzschrittmacher, gesundheitliche Einschränkungen) Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf feuchten Flächen und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen oder eine Gefahr darstellen können.

WARNUNG ZUR WÄRMEFUNKTION

- Sollten **Personen mit empfindlicher Haut und geringer Hitzebeständigkeit** das Gerät im „Automatik“-Modus verwenden, bewegen Sie das Gerät alle 3 Minuten und vermeiden Sie einen längeren Kontakt mit der Haut an derselben Körperstelle, um das mögliche Auftreten von Rötungen zu vermeiden.
- **Personen mit empfindlicher Haut, die nur wenig Wärme vertragen**, empfehlen wir das Gerät nur im „manuellen“ Modus verwenden. Hier kann die Temperatur auf die Mindeststufe oder auf die Stufe eingestellt werden, die Sie für Ihre Haut für angemessen halten.
- **Menschen mit Hautallergien und geringer Hitzebeständigkeit:** nicht direkt auf der Haut verwenden, sondern feinmaschige Kleidung zum Schutz der Haut tragen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf und drücken Sie es nicht während des Gebrauchs auf die Haut.
- Bei übermäßiger Erwärmung stellen Sie den Betrieb ein und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

ANWENDUNG

1. Schließen Sie das Kabel an das Gerät an.
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
3. Legen Sie das Gerät an. Ziehen Sie den Gürtel durch die Metallschleufe am Ende des Geräts, ziehen Sie das Gerät fest und befestigen Sie den Gürtel am Klettverschluss.
4. Drehen Sie das Steuerelement des Geräts nach vorne, um das Display und die Tasten zu sehen.
5. **Einschalten:** Betätigen Sie die rote Power-Taste um das Gerät einzuschalten.
6. **Modus wählen:** Das Gerät schaltet sich nun ein. Wählen Sie einen Modus entsprechend Ihren Anforderungen und das entsprechende Licht leuchtet auf. Mehr Informationen zu den Modi finden Sie nachfolgend.
7. **Positionieren:** drehen Sie das Gerät in die gewünschte Position (zB. Rücken).

MODI (#2+3)

Das Gerät startet im manuellen **Modus, wenn Sie das Gerät starten.**

MANUELLER MODUS

1. Betätigen Sie die rote Power-Taste um das Gerät einzuschalten.
2. Das Gerät startet im manuellen Modus. Alle 3 Funktionen sind in Stufe 1 aktiviert (siehe unten).
Vibration 1
Wärme 1
Extrusion 1
3. **Vibration einstellen:** Drücken Sie die Menütaste „M“ einmal, um in den Vibrationsmodus zu gelangen (die Lampen dieses Modus blinken), drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Stufe einzustellen.

4. **Wärme einstellen:** Drücken Sie zum 2. Mal die Menütaste „M“, um in den Wärmemodus zu gelangen (die Lampen dieses Modus blinken), drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Stufe einzustellen.
5. **Massage einstellen:** Drücken Sie die Menütaste „M“ zum 3. Mal, um in den „Extrusionsmodus“ zu gelangen (die Lampen dieses Modus blinken), drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Stufe einzustellen.
6. **Erneut einstellen:** Drücken Sie erneut die Menütaste „M“, um bei Bedarf eine vorherige Einstellung vorzunehmen.
7. **Modus wechseln/ ausschalten:** Wenn Sie den manuellen Modus verwenden, können Sie jederzeit zum automatischen Modus wechseln oder den Gürtel durch Drücken der roten Power-Taste ausschalten.

AUTOMATISCHER MODUS

1. Drücken Sie die Menütaste „M“ 3 Sekunden lang, um die Funktion zu verlassen und in automatischen Modus, mit dem vorprogrammierten Programm zu gelangen. Das Gerät piepst und das automatische Programm wird gestartet. Das Programm dauert 15 Minuten. Das Gerät schaltet sich nach Beendigung des Programms ab.

Programmmodus (15 Minuten Programm, Wechsel alle 60 Sekunden)															
Vibration	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2
Erhitzen	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2
Extrusion	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2

2. Um den automatischen Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die Menütaste „M“ 3 Sekunden lang, um wieder in den manuellen Modus zu wechseln.

REINIGUNG & WARTUNG

1. Das Kabel des Geräts ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch (vermeiden Sie die Verwendung von chemischen, scheuernden Lösungsmitteln).
3. Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.
4. Die Außenseite und die Unterseite des Produkts sollten stets trocken gehalten werden. Es ist strengstens untersagt, es in Wasser zu tauchen oder abzuspülen. Verwenden Sie keinerlei Werkzeuge zur Reinigung.
5. Bei Nichtbenutzung an einem trockenen, gut belüfteten Raum aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

VibroShaper Belt: 12V==1A, 15W

Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.

Netzadapter: Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0,6A
Output: 12.0V== 1,5A 18.0W

U/Min.: Stufe 1: 1150 U/Min. Stufe 2: 1300 U/Min. Stufe 3: 1550 U/Min.

Wärmeintensität: Stufe 1: 45±3°C Stufe 2: 55±3°C Stufe 3: 65±3°C

Produktgewicht: 0,85 kg

Gürtelmaterial: Nylon und EVA

Max. Nutzungsdauer: 30 Minuten

Hergestellt in China



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreibern im Sinne des Elektroggesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie, wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Schutzklasse II

Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Importeur | Importer:

CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 - kostenlose Servicehotline

ROW: +423 388 18 00

Stand: 05/2022 | M33772